

Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON[®] II

Legendas dos símbolos utilizados nas embalagens

	Número de referência		Código do lote
	Esterilizado utilizando irradiação		Data de fabricação
	Validade		Consultar instruções para utilização
	Não reutilizar		Não reesterilizar
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Manter afastado de luz solar
	Frágil, manusear com cuidado		Limite superior de temperatura (35°C)
	Manter seco		
	Cuidado, consultar os documentos acompanhantes	CE 0124	Certificação da Comunidade Européia

Especificações e características técnicas do produto

Nome Técnico: Acetábulo monocomponente para artroplastia de quadril

Nome Comercial: Calota Acetabular HORIZON[®] II

Modelo Comercial: Acetábulo com furos HORIZON[®] II

Acessório: Parafuso de Fixação Ø 6,5 mm

Matéria-Prima:

- Acetábulo: Liga de Titânio (Ti-6Al-4V) – ISO 5832-3
Revestimento Duplo (Plasma spray Titânio (Ti) – ASTM F1580 + Hidroxiapatita Cerâmica (Ca₅(OH)(PO₄)₃) – ASTM F1185
- Parafuso de Fixação: Liga de Titânio (Ti-6Al-4V) – ISO 5832-3

Produto Estéril

Método de Esterilização Radiação Gama (25 kGy)

Validade: 05 anos

Descrição:

A família de Calota Acetabular HORIZON[®] II é composta por dispositivos implantáveis, invasivos cirurgicamente de utilização em longo prazo, destinado a procedimentos de substituição articular do quadril.

Os acetábulo que compõem esta família são produzidos a partir da liga de titânio (Ti-6Al-4V) com revestimento duplo (Titânio e Hidroxiapatita), que estimula o crescimento ósseo e promove a fixação biológica, através da calcificação do acetábulo ao córtex interno da pélvis.

A forma de fixação à cavidade acetabular é por meio de impactação (*press fit*), podendo ser complementada por fixação adicional parafusada, nos casos em que o cirurgião não obtém uma “*prise*” (pressão) adequada ou para pacientes com deficiência de estoque ósseo acetabular.

O procedimento de substituição articular do quadril é realizado nas circunstâncias em que esta articulação, em indivíduos esqueleticamente maduros, apresenta-se comprometida em consequência de patologias como: doença articular degenerativa não inflamatória (osteoartrose), necrose avascular da cabeça femoral, protusão acetabular, osteoartrose secundária a traumatismos ou artrodese cirúrgica do quadril.

Os acetábulo foram desenvolvidos para uso exclusivo com os insertos e cabeças femorais em cerâmica BIOLOX[®] Delta AMPLITUDE.

Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON[®] II



O acessório Parafuso de Fixação Ø 6,5 mm fabricado a partir da liga de titânio (Ti-6Al-4V), quando necessário, é aparafusado ao acetábulo com a finalidade de fixá-lo, nos casos em que o paciente possui estoque ósseo deficiente.



Composição:

Os materiais selecionados para a fabricação reúnem as propriedades físico-químicas e mecânicas requeridas para atingir o desempenho pretendido para o produto. A seleção considerou fatores como, efeitos da fabricação, manuseio, esterilização, armazenamento, bem como possíveis reações do material com tecidos humanos e fluidos corpóreos.

Os materiais de fabricação são compatíveis com os tecidos biológicos, células e tecidos corpóreos com os quais entram em contato em estado implantável, comprovado pelo histórico de utilização em aplicações similares disponíveis na literatura científica e clínica mundial. Essa comprovação também se aplica aos possíveis produtos de desgaste e degradação dos materiais em níveis aceitáveis ao longo da sua utilização.

Os materiais utilizados para a fabricação do produto e suas respectivas combinações para as superfícies de articulação e de contato encontram-se relacionados respectivamente nos anexos A, B e C da norma ISO 21534 – *Non-active surgical implants -- Joint replacement implants -- Particular requirements*, que estabelece a relação de normas para materiais considerados aceitáveis através do uso comprovado pela literatura científica e clínica para a fabricação de implantes.

Os acetábulos que compõem a família de Calota Acetabular HORIZON[®] II, e o acessório Parafuso de Fixação Ø 6,5 mm são fabricados a partir da liga de titânio (Ti-6Al-4V) que cumpre com os requisitos especificados pela norma ISO 5832-3 *Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy*.

Os acetábulos possuem duplo revestimento em sua superfície convexa. Revestimento de pó de titânio (Ti) e revestimento de hidroxiapatita cerâmica ($\text{Ca}_5(\text{OH})(\text{PO}_4)_3$) que cumprem com os respectivos requisitos especificados pelas normas ASTM F1580 - *Standard Specification for Titanium and Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium Alloy Powders for Coatings of Surgical Implants* e ASTM F1185 *Standard Specification for Composition of Hydroxylapatite for Surgical Implants*.

A escolha destes materiais para a fabricação dos modelos comerciais que compõem a família de Calota Acetabular HORIZON[®] II baseou-se em critérios de similaridade (resultados largamente descritos na literatura) e por suas características de biocompatibilidade e propriedades físico-química e mecânica comprovadas pelas normas de especificação destes materiais.

Indicação e Finalidade

Os modelos comerciais que compõem a família de Calota Acetabular HORIZON[®] II estão indicados para cirurgia de substituição total da articulação do quadril, em pacientes esqueleticamente maduros. Os acetábulos podem ser utilizados em cirurgias primárias ou cirurgias de revisão, caso, após a remoção do acetábulo antigo, o cirurgião avalie como suficientemente boa a condição do osso acetabular.

Os acetábulos estão indicados para os casos de:



Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

- Osteoartrite de quadril
- Displasia de quadril
- Osteoartrite pós-traumática de quadril
- Outras osteoartrites de quadril
- Osteonecrose asséptica
- Atrite reumatoide / doenças inflamatórias
- Artroplastia após artrodese ou após osteotomia (como osteotomia periacetabular ou osteotomia trocantérica)
- Fratura
- Revisão de prótese intermediária
- Revisão parcial ou completa de prótese total de quadril

Os acetábulos da família de Calota Acetabular HORIZON® II devem ser utilizados com os insertos e cabeças femorais em cerâmica fabricados pela AMPLITUDE.

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para utilização nas circunstâncias acima descritas, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico que suportem o seu uso.

Contraindicações:

A seguir estão listadas as contraindicações relativas para a utilização do dispositivo, ficando a cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação dos procedimentos:

- Pacientes com infecções ativas gerais ou específicas que possam levar a complicações.
- Pacientes com estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico.
- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, sendo que nestes casos testes deverão ser realizados.
- Pacientes com osteoporose e/ou outras afecções ósseas que possam comprometer o resultado da artroplastia.
- Pacientes portadores de doenças ósseas rapidamente destrutivas ou osteonecrose pós-irradiação.
- Pacientes portadores de doenças neurológicas progressivas.
- Pacientes portadores de doenças circulatórias locais e com insuficiências arteriais ou venosas.
- Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo.
- Pacientes com ausência de suporte ósseo que permita uma fixação adequada do implante;
- Pacientes com ausência ou paresia da musculatura que controla o quadril.
- Os componentes acetabulares com insertos BIOLOX® Delta não devem ser implantados fora do intervalo de anteversão de 10° a 20° e do intervalo de inclinação de 40° a 45°. Fora desta faixa há restrição no movimento que pode levar a subluxação e/ou deslocamento da cabeça da inserção de cerâmica.

Formas de apresentação do produto médico.

Forma de Embalagem

Os modelos comerciais que compõem a família de Calota Acetabular HORIZON® II são acondicionados unitariamente em sistema de embalagem com duplo blister, selados com papel grau cirúrgico (tipo Tyvek®), que funcionam como dupla barreira de esterilização.

O produto é disponibilizado para comercialização na condição de produto estéril, sendo que o método de esterilização adotado é a esterilização por Radiação Gama (dose 25 kGy).

Depois de esterilizados os componentes embalados em sua embalagem primária devidamente rotulada, são acondicionados unitariamente em uma cartonagem de papelão (embalagem secundária), a qual segue com seis vias da etiqueta de rastreabilidade e com um folheto, contendo as instruções de uso para a correta utilização e manuseio do produto.

Sobre a embalagem primária e sobre a cartonagem é colado um rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto.

O acessório Parafuso de Fixação Ø 6,5 mm é acondicionado unitariamente em sistema de embalagem tipo PA/PE que funcionam como dupla barreira de esterilização.

O produto é disponibilizado para comercialização na condição de produto estéril, sendo que o método de esterilização adotado é a esterilização por Radiação Gama (dose 25 kGy).



Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

Depois de esterilizados o produto embalado em sua embalagem primária é acondicionado unitariamente em uma cartonagem de papelão (embalagem secundária), a qual segue com seis vias da etiqueta de rastreabilidade.

Sobre a embalagem primária e sobre a cartonagem é colado um rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto




Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

Forma de Apresentação

A família de Calota Acetabular HORIZON® II é composta pelos seguintes modelos comerciais, sendo que cada um desses modelos comerciais são disponibilizados para comercialização nas seguintes dimensões:

Relação dos modelos comerciais que compõem a família de Calota Acetabular HORIZON® II

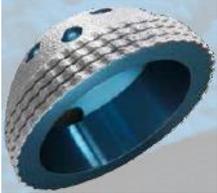Imagem Ilustrativa	Código	Descrição	Dimensões	Material de Fabricação	Qtde Embalada
	1-0110248	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 48	Tamanhos: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 mm	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V) + Revestimento Duplo (Plasma spray Titânio (Ti)/ Hidroxiapatita Cerâmica (Ca ₅ (OH)(PO ₄) ₃))	01
	1-0110250	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 50			
	1-0110252	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 52			
	1-0110254	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 54			
	1-0110256	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 56			
	1-0110258	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 58			
	1-0110260	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 60			
	1-0110262	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 62			
	1-0110264	Acetábulo com furos HORIZON® II - Tamanho 64			
Acessório					
Imagem Ilustrativa	Código	Descrição	Dimensões	Material de Fabricação	Qtde Embalada
	1-0101616	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 16 mm	Diâmetro: Ø6.5 mm Comprimento: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 mm	Liga de Titânio Ti-6Al-4V	01
	1-0101620	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 20 mm			
	1-0101625	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 25 mm			
	1-0101630	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 30 mm			
	1-0101635	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 35 mm			
	1-0101640	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 40 mm			
	1-0101645	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 45 mm			
	1-0101650	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 50 mm			
	1-0101655	Parafuso de fixação Ø 6,5 x 55 mm			

Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON[®] II

Componentes Ancilares

A seguir estão relacionados os componentes ancilares compatíveis aos modelos comerciais que compõem a família de Calotas Acetabulares HORIZON[®] II:

- Insertos Acetabulares Cerâmicos BIOLOX[®] Delta AMPLITUDE.
- Cabeça Femoral Cerâmica BIOLOX[®] Delta AMPLITUDE.
- Haste Femoral sem Cimento.

Os componentes ancilares relacionados acima não são objetos desse processo de registro, devendo, portanto ser adquiridos separadamente e sempre do mesmo fabricante ou de fabricante indicado por este.


O Inserto Acetabular Cerâmico e a Cabeça Femoral Cerâmica são produzidos a partir da Cerâmica BIOLOX[®] Delta (matriz Al₂O₃ / ZrO₂) que cumpre com os requisitos especificados pela norma ISO 6474-2 *Implants for surgery — Ceramic materials – Part 2: Composite materials based on a high purity alumina matrix with zirconia reinforcement*.

A Haste Femoral sem cimento é fabricada a partir da liga de titânio (Ti-6Al-4V) que cumpre com os requisitos especificados pela norma ISO 5832-3 *Implants for surgery -- Metallic materials -- Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy*. A haste possui revestimento de hidroxiapatita cerâmica (Ca₅(OH)(PO₄)₃) e cumpre com o requisito especificado pela norma ASTM F1185 *Standard Specification for Composition of Hydroxylapatite for Surgical Implants*.

A correta seleção dos modelos, medidas e combinações dos modelos comerciais que compõem a família de, bem como de seus ancilares a serem implantados é responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo esse estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado.

O êxito da consolidação está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação dos implantes, que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais materiais deverão ser utilizados, está vinculado também ao rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.

A seguir indicação dos componentes ancilares e a sua correta combinação com os modelos comerciais que compõem a família de para as seguintes possibilidades de montagem:

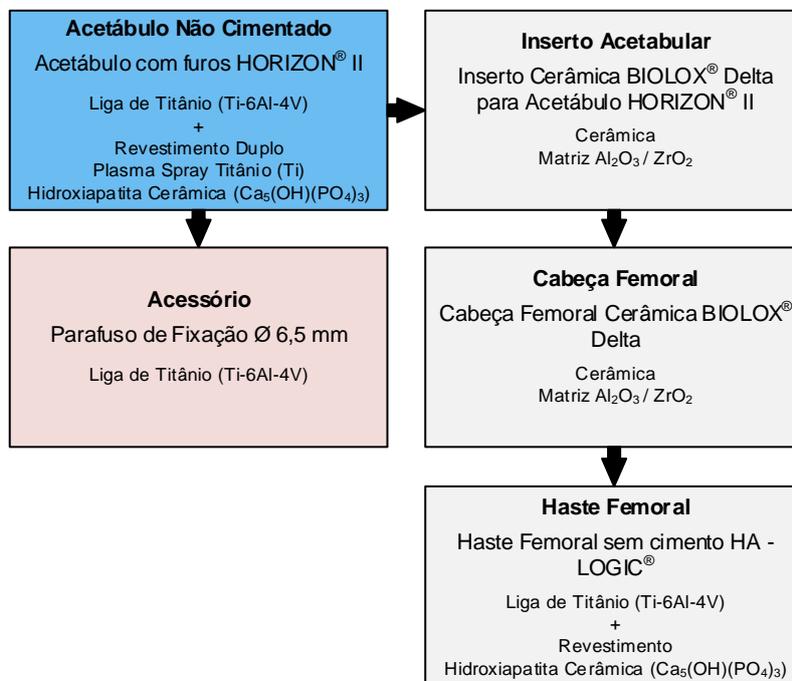



Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

Relação dos componentes ancilares compatíveis com os modelos comerciais que compõem a família de Calota Acetabular HORIZON® II

Imagem Ilustrativa	Código	Descrição	Material de Fabricação
	1-0191101	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 28 Colo Curto	Cerâmica Matriz Al ₂ O ₃ / ZrO ₂ ISO 6474-2
	1-0191102	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 28 Colo Médio	
	1-0191103	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 28 Colo Longo	
	1-0191111	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 32 Colo Curto	
	1-0191112	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 32 Colo Médio	
	1-0191113	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 32 Colo Longo	
	1-0191121	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 36 Colo Curto	
	1-0191122	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 36 Colo Médio	
	1-0191123	Cabeça femoral cerâmica BIOLOX® Delta 10/12 Ø 36 Colo Longo	
	1-0108636	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 48/28	Cerâmica Matriz Al ₂ O ₃ / ZrO ₂ ISO 6474-2
	1-0108639	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 50/28 & 52/28	
	1-0110039	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 50/32 & 52/32	
	1-0110044	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 54/32 & 56/32 & 58/32	
	1-0110048	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 60/32 & 62/32	
	1-0110144	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 54/36 & 56/36 & 58 & 36	
	1-0110148	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 60/36 & 62/36	
	1-0110052	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 64/32	
	1-0110152	Inserto Cerâmica BIOLOX® Delta para acetábulo HORIZON® II Tamanho 64/36	
	1-0101701	Haste Femoral LOGIC® sem cimento HA tamanho 1 – 10x140 mm	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V) ISO 5832-3 + Revestimento Hidroxiapatita Cerâmica (Ca ₅ (OH)(PO ₄) ₃) ASTM F1185
	1-0101702	Haste Femoral LOGIC® sem cimento HA tamanho 2 – 11,5x146 mm	
	1-0101703	Haste Femoral LOGIC® sem cimento HA tamanho 3 – 13x151 mm	
	1-0101704	Haste Femoral LOGIC® sem cimento HA tamanho 4 – 14,5x157 mm	
	1-0101705	Haste Femoral LOGIC® sem cimento HA tamanho 5 – 16x162 mm	
	1-0101706	Haste Femoral LOGIC® sem cimento HA tamanho 6 – 18x168 mm	
	1-0101707	Haste Femoral LOGIC® sem cimento HA tamanho 7 – 19x174 mm	

Os componentes ancilares relacionados acima não são objetos desse processo de registro, devendo, portanto ser adquiridos separadamente e sempre do mesmo fabricante ou de fabricante indicado por esse.



Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

Materiais de apoio

Os materiais de apoio são os instrumentais designados unicamente para implantação dos produtos da família Calota Acetabular HORIZON® II.

Os instrumentais abaixo não são objetos desse processo de registro, devendo, portanto serem adquiridos separadamente e sempre do mesmo fabricante do implante ou por fabricante indicado por esse.

Segue abaixo os instrumentais disponibilizados pelo fabricante ou por fabricante indicado por este para implantação dos produtos.

- Instrumental para aplicação de quadril – AMPLITUDE – mecânico.
- Instrumental para aplicação de quadril – AMPLITUDE – navegado.

Os instrumentais são fornecidos descontaminados, porém não esterilizados. Esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção.

Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgastes durante a sua utilização normal podendo, portanto quebrarem-se.

Os instrumentais devem ser utilizados somente para os fins a que se destinam, devendo ser inspecionados regularmente para verificação de possíveis desgastes e danos.

Para mais informações acerca do instrumental, consulte o representante.

A AMPLITUDE não se responsabiliza nos caso do uso incorreto do dispositivo médico.

Advertências e Precauções

Para a utilização do produto a equipe responsável deve considerar as seguintes advertências e precauções:

- O produto somente deve ser utilizado após uma análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura da instrução de uso.
- O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas, com conhecimento e capacitação específica sobre as técnicas de artroplastias, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada.
- A seleção e escolha inadequada dos implantes a serem utilizados, bem como erros na indicação, manipulação e técnica de aplicação podem provocar tensões e trações excessivas sobre o implante, podendo acarretar a falência por fadiga, fratura e até a soltura dos mesmos.
- Os resultados clínicos e a durabilidade dos implantes são extremamente dependentes de que haja uma técnica cirúrgica precisa.
- A implantação sob leito ósseo inadequado pode causar afrouxamento prematuro e perda progressiva do estoque ósseo. Nesses casos métodos suplementares de enxertia óssea em conjunto com telas e reforços devem ser adotados.
- O produto não deve ser utilizado em associação a cimento ósseo.
- A utilização dos parafusos de fixação é restrita a fixação do acetábulo não cimentado.
- A fixação inadequada do acetábulo não cimentado pode causar afrouxamento e/ou desgaste precoce, bem como perda progressiva do estoque ósseo.
- A inserção inadequada da cabeça do parafuso de fixação no orifício do acetábulo não cimentado pode causar erosão por atrito do inserto acetabular (cerâmica) e, conseqüente formação de debris.
- A utilização em pacientes com predisposição a desobedecer as orientações médicas e restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do implante.
- Os riscos de falha do implante são maiores em pacientes que exerçam atividades de esforços ou que praticam atividades esportivas, durante o período pós-operatório, contrariando as restrições médicas.

Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON[®] II

- As complicações pós-operatórias representam um risco maior quando da utilização do produto em pacientes com expectativas funcionais além do que pode ser promovido pela substituição articular, pacientes com obesidade mórbida e pacientes com ossatura pequena.
- O produto não deve ser utilizado caso não se consiga um suporte ósseo adequado que garanta a estabilidade do implante.
- O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante e do osso e dos tecidos adjacentes.
- A critério médico pode-se fazer uso de antibioticoterapia profilática pré e perioperatória, bem como antibioticoterapia em casos onde haja predisposição local e/ou sistêmica ou onde haja ocorrência de infecções.
- O implante não deve ser utilizado com componentes de outros fabricantes ou finalidade. A combinação de implantes de fabricantes ou finalidades distintas pode resultar incongruência entre os componentes.
- Deve ser observada rigorosamente a identificação do produto e não são permitidas combinações com componentes de outros fabricantes ou finalidade.
- Somente devem ser utilizados componentes com medidas cônicas idênticas, conforme especificado pelo fabricante no tópico “Forma de Apresentação”.
- Os cuidados com este material são de responsabilidade do pessoal habilitado, os quais devem seguir as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis.
- Quedas ou esmagamento sobre superfícies duras podem causar danos ao produto. Dessa forma faz-se necessário que o usuário realize uma inspeção no produto, quanto a sua integridade, quando da abertura da embalagem e, se for observada alguma anormalidade, o produto não deverá ser utilizado.
- Quando da impactação do inserto no acetábulo, é necessário limpar e secar minuciosamente o acetábulo metálico.
- Os insertos acetabulares são introduzidos manualmente, utilizando dois dedos, fazendo-os deslizar ao longo do cone Morse do acetábulo metálico. As extremidades reunidas da calota acetabular metálica e do inserto devem apresentar uma superfície plana. Pressionar firmemente no encaixe com o polegar.
- O ângulo de inclinação dos componentes acetabulares com inserto não deve ser inferior a 40° ou superior a 45°. A anteversão não deve ser inferior a 10° ou superiores a 20°. Os valores fora destes intervalos podem restringir os movimentos podendo resultar em subluxações e/ou luxações e risco de fratura.
- A abertura da embalagem para utilização cirúrgica deverá ser feita pelo pessoal habilitado para este procedimento.
- Não utilize o produto se estiver com a validade vencida ou com a embalagem violada.
- Manipule com cuidado.
- Produto de uso único – Não reutilizar.
- Os implantes NUNCA devem ser reutilizados, embora possam parecer não estarem danificados, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos podem originar imperfeições que reduziram o tempo de vida útil do produto num reimplante.
- Produto estéril – Não reesterilizar.
- PROIBIDO REPROCESSAR.
- Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide rótulo.

Efeitos Adversos

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidades de complicações, sendo que alguns riscos comuns são as infecções, sangramentos, reações alérgicas medicamentosas e riscos anestésicos, entre outros, podendo ser ainda associadas à implantação do produto, as seguintes complicações e efeitos adversos:

- Afrouxamento, deslocamento, deformação, fratura do implante ou osteólise.

Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

- Dores pós-operatórias, desconforto ou sensações anormais devido ao produto.
- Reações a corpo estranho.
- Reações inflamatórias, associadas ou não ao afrouxamento e/ou soltura do implante.
- Necrose óssea ou dos tecidos moles adjacentes.
- Quebra do implante que possa tornar a sua remoção difícil ou impraticável.
- Complicações como hematoma ilíaco, fistula vesical, trombose da artéria ilíaca externa, paralisia do nervo ciático, hemorragia intra-pélvica fatal em consequência da penetração pélvica transacetabular pelos parafusos de fixação.
- Discrepância no comprimento do membro.
- Ossificação heterotópica.
- Remodelação óssea pejorativa.
- Desgaste das superfícies de contato.
- Fratura periprotética.
- Ruídos na prótese articular.

Instruções de uso

Para a correta utilização do produto, as seguintes instruções devem ser adotadas:

- Os cuidados com este material é de responsabilidade do pessoal habilitado, os quais devem seguir as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis.
- O produto deve ser manipulado com os devidos cuidados em locais adequados (centro de materiais e salas cirúrgicas).
- O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas, com conhecimento e capacitação específica sobre as técnicas de artroplastia, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada;
- Para evitar riscos inerentes, o parafuso de fixação deve ser implantado na porção posterior do acetábulo (quadrantes superior e inferior).
- A critério médico, após a inserção do acetábulo, caso não se consiga uma boa estabilidade do implante, devem ser utilizados os parafusos de fixação, para a obtenção da estabilidade necessária.
- O período de vida útil estabelecido para o produto é de 10 (dez) anos, desde que os dispositivos sejam implantados adotando-se uma técnica cirúrgica adequada e observando-se as informações dos tópicos “Indicação”, “Contraindicação”, “Advertências e Precauções” e “Instruções de Uso”.
- A critério médico poderá ser necessária, a realização da cirurgia de revisão após o período de vida útil, caso seja observado o desgaste e/ou soltura de componentes.
- Para a aplicação da Calota Acetabular HORIZON® II é necessário o uso de um instrumental específico, não devendo, devido à possibilidade de incompatibilidade dimensional e/ou funcional, serem utilizados outros instrumentos que não os indicados pelo fabricante.

Orientações ao Paciente e/ ou Representante Legal

A equipe responsável deve orientar o paciente ou seu representante legal sobre:

- Os cuidados adequados e as restrições durante o período pós-operatório. A capacidade e a vontade do paciente em seguir essas orientações constituem um dos aspectos mais importantes em um procedimento cirúrgico.
- O fato de que os riscos são maiores quando da utilização em pacientes com predisposição a desobedecer as orientações médicas, cuidados e restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos.
- O fato de que o produto não substitui e não possui o mesmo desempenho do osso normal e que, portanto, pode quebrar-se deformar-se ou soltar-se em decorrência de esforços ou atividades excessivas, de carga precoce e outras situações.
- Todas as restrições pós-operatórias, sobretudo as relacionadas às atividades esportivas e ocupacionais.



Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

- As complicações pós-operatórias representam um risco maior quando da utilização do produto em pacientes com expectativas funcionais além do que pode ser promovido pela substituição articular, pacientes com obesidade mórbida e pacientes com ossatura pequena.
- A necessidade da utilização, exclusivamente a critério médico, de suportes externos, auxílio para deambular e aparelhos ortopédicos, projetados para limitar movimentos e/ou a carga.
- A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, do osso e dos tecidos adjacentes.
- O fato de que a não realização da cirurgia da revisão quando da soltura dos componentes pode resultar em perda progressiva do estoque ósseo.
- O fato de que os implantes podem interferir nos resultados de exames por imagens. Desta forma, portadores de implantes devem informar esse fato quando da realização de tais exames.
- As complicações relativas aos procedimentos de artroplastia do quadril, bem como as informações listadas neste tópico “Orientações ao Paciente e/ou ao Representante Legal” e no tópico “Efeitos Adversos”.

Esterilização

Os modelos comerciais que compõem a família de Calota Acetabular HORIZON® II são fornecidos na condição de produto estéril. O método de esterilização adotado é a esterilização por radiação gama (dose de esterilização 25 kGy).

A fabricação do produto é realizada com grande cuidado de modo a atender o desempenho pretendido para o produto. Desta forma, a equipe cirúrgica e os demais envolvidos devem manipular os dispositivos adequadamente para que sejam minimizados os riscos de infecção.

Produto estéril – não reesterilizar.

Não utilize o produto se estiver com a embalagem violada.

Risco de Contaminação

Por tratar-se de um produto implantável, nos casos em que haja a necessidade da explantação do produto, existem riscos de contaminação biológica e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, os produtos explantados devem ser tratados como material potencialmente contaminante, devendo-se adotar as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis.

Descarte do Produto

Os componentes explantados ou considerados inadequados para o uso devem ser descartados. Recomenda-se que, antes do descarte, o produto seja descaracterizado, para tal as peças podem ser cortadas, entortadas ou limadas.

Os implantes devem ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

Produto de Uso Único – NÃO REUTILIZAR.

PROIBIDO REPROCESSAR

Rastreabilidade

Para garantir a rastreabilidade do produto implantado, e cumprir com os requisitos de vigilância sanitária, o cirurgião ou sua equipe deve registrar no prontuário do paciente as informações acerca do produto. Além disso, essas informações devem ser também repassadas ao distribuidor do produto e ao paciente, de modo a completar o ciclo de rastreabilidade do produto implantado. As informações necessárias para rastreabilidade são as relativas ao produto utilizado, cirurgia e paciente, conforme abaixo:

- Nome do paciente que recebeu o implante;
- Nome do cirurgião;



Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

- Nome do Hospital;
- Nome do Fabricante;
- Nome do Fornecedor;
- Data da cirurgia;
- Código do produto;
- Número de lote do produto;
- Quantidades utilizadas;
- Nº. do registro do produto na ANVISA;

O cirurgião responsável e sua equipe devem fazer uso das etiquetas de rastreabilidade fornecidas na embalagem do produto. São fornecidas 5 (cinco) etiquetas de rastreabilidade contendo as seguintes informações necessárias para a rastreabilidade do produto:

- Identificação do importador;
- Identificação do fabricante;
- Código do componente;
- Nº de lote do componente;
- Descrição do componente;
- Nº. do registro na ANVISA;
- Nome técnico;
- Nome comercial do produto;

Recomenda-se que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas conforme indicado abaixo:

- Uma etiqueta deve ser fixada no documento na entrega do material ao hospital;
- Outra etiqueta deve ser fixada na nota fiscal de venda, que contém o nome do paciente, do hospital e do cirurgião;
- Outra etiqueta deve ser fixada no prontuário do paciente;
- Outra etiqueta deve permanecer no arquivo do hospital;
- E por fim, uma etiqueta deverá ser entregue ao paciente.

As informações de rastreabilidade são necessárias para notificação pelo serviço de saúde e/ou pelo próprio paciente à Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA e ao fabricante, quando da ocorrência de eventos adversos graves, para a condução das investigações cabíveis.

Armazenamento e Transporte

Para o armazenamento, recomenda-se local seco e arejado, sem exposição à incidência de luz, à umidade ou à substâncias contaminantes.

Por tratar-se de um produto estéril, a umidade e a temperatura do local de armazenamento deve ser monitorada, sendo que a temperatura deve ser mantida abaixo de 35º.

Os implantes não podem ser armazenados diretamente sobre o chão. Assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com altura mínima de 20 cm.

O produto deve ser mantido em suas embalagens originais até o momento de sua utilização, sendo que a abertura da embalagem para utilização cirúrgica e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento;

O produto deve ser transportado adequadamente, evitando-se quedas e atritos que possam danificar a estrutura e a superfície da peça.

Para informações acerca da data de fabricação, prazo de validade e nº. do lote: vide rótulo.



Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dados do Fabricante:

Amplitude SAS

Zone d' Activité Mozart 2

11, Cours Offenbach

26000 Valence. France

Tel. 33 475418741/ Fax: 33 475418742

www.amplitude-ortho.com

Importado e distribuído por:

AMPLITUDE LATIN AMERICA S.A.

Endereço: Rua 06, 1460 Sala 45 – Edif. São Lucas – Centro– Rio Claro/ SP – Brasil

CEP: 13500-190

Fone/Fax: +55 19 3524-8463

Responsável Técnico: Thabata Carbinatti – **CRF-SP 75075**

Registro ANVISA nº.: 80726260047

Revisão: 01

Emissão: 26/06/2017



Instrução de Uso Calota Acetabular HORIZON® II

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Estas INSTRUÇÕES DE USO são disponibilizadas em formato não impresso, através do endereço eletrônico do importador e distribuidor <http://www.amplitude-latam.com>

As INSTRUÇÕES DE USO estão indexadas no *site* através do NÚMERO REGISTRO/ CADASTRO ANVISA e respectivo NOME COMERCIAL do produto, informados no rótulo do produto adquirido.

Todas AS INSTRUÇÕES DE USO disponibilizadas no *website* possuem a identificação da revisão e data de emissão do documento. Sendo que o usuário deve atentar-se para a correta versão (revisão e data de emissão) do documento em relação à DATA DE FABRICAÇÃO informada no rótulo do produto adquirido.

Caso seja de interesse do usuário, as INSTRUÇÕES DE USO poderão ser fornecidas em formato impresso, sem custo adicional. Sendo que a solicitação das mesmas deverá ser realizada junto ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do importador, informado a seguir:

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: +55 19 3524-8463

FAX: +55 19 3524-8463

<http://www.amplitude-latam.com>

Rua 06, 1460 Sala 45 – Edif. São Lucas – Centro CEP: 13500-190| Rio Claro – São Paulo – Brasil

Horário de atendimento: 8hs às 17hs, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.