


SATURNE[®] II

Cupule double mobilité
sans ciment revêtue Ti + HAP



- Cupule cylindro-sphérique avec 3mm de débord cylindrique
- Pôle aplati
- Press-fit équatorial : 1mm au diamètre sur toutes les tailles
- Double revêtement : spray titane (80 µm) et HAP (80 µm)

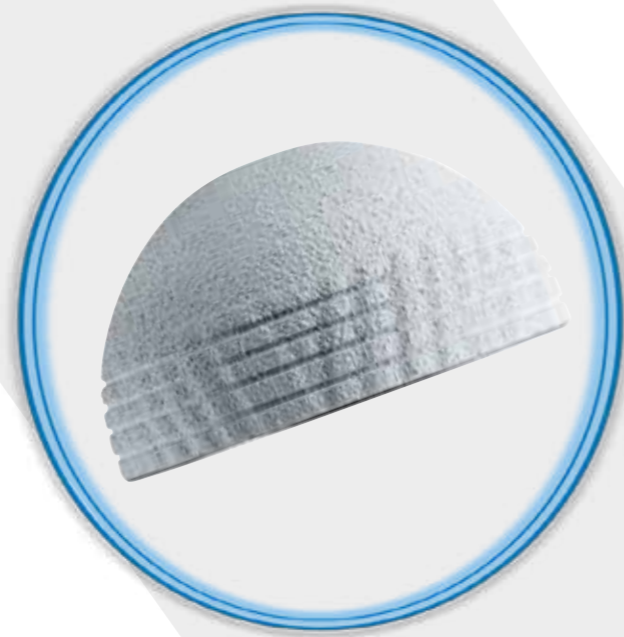

- Rainures concentriques à l'équateur
- Rainures en chevrons inversées



- Surface intérieure poli-miroir
- Rebords arrondis
- Matière : acier inoxydable M30NW

- Instrumentation version courbe ou droite
Une seule boîte d'instrumentation



- Insert rétentif pour têtes fémorales ø22.2 et ø28 mm
- Chanfrein au seuil de la zone de rétentivité, offrant un appui tardif au col, et un débattement plus important de la tige fémorale dans l'insert
- Matière : UHMWPE



CUPULES DOUBLE MOBILITE SATURNE® II sans ciment revêtu Ti/HAP

Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 42	1-0111342
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 44	1-0111344
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 46	1-0111346
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 48	1-0111348
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 50	1-0111350
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 52	1-0111352
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 54	1-0111354
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 56	1-0111356
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 58	1-0111358
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 60	1-0111360
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 62	1-0111362
Cupule double mobilité SATURNE® II - Taille 64	1-0111364

INSERTS DOUBLE MOBILITE SATURNE®

	Pour tête Ø22,2mm	Pour tête Ø28mm
Insert SATURNE® - Taille 42	1-0103642	-
Insert SATURNE® - Taille 44	1-0103644	-
Insert SATURNE® - Taille 46	1-0103646	-
Insert SATURNE® - Taille 48	1-0103648	1-0103748
Insert SATURNE® - Taille 50	1-0103650	1-0103750
Insert SATURNE® - Taille 52	1-0103652	1-0103752
Insert SATURNE® - Taille 54	1-0103654	1-0103754
Insert SATURNE® - Taille 56	1-0103656	1-0103756
Insert SATURNE® - Taille 58	1-0103658	1-0103758
Insert SATURNE® - Taille 60	1-0103660	1-0103760
Insert SATURNE® - Taille 62	1-0103662	1-0103762
Insert SATURNE® - Taille 64	1-0103664	1-0103764

Date de création : Décembre 2016 - Fabricant responsable : AMPLITUDE, 11 cours Jacques Offenbach, 26000 Valence - Destination : remplacement de l'articulation de la hanche en association avec un composant fémoral - Classe du DM : III - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter les modalités sur le site ameli.fr - Indications et recommandations d'utilisation : il convient de lire attentivement les instructions des étiquettes et les notices d'utilisation du produit.

Service Clients-France :

Porte du Grand Lyon,
01700 Neyron, France
Tel. : +33 (0)4 37 85 19 19
Fax : +33 (0)4 37 85 19 18
E-mail : amplitude@amplitude-ortho.com

Customer Service-Export :

11, cours Jacques Offenbach. Zone Mozart 2,
26000 Valence, France
Tel. : +33 (0)4 75 41 87 41
Fax : +33 (0)4 75 41 87 42
E-mail : amplitude@amplitude-ortho.com

Internet : www.amplitude-ortho.com