


SATURNE[®] II

Acetábulo de Dupla Mobilidade
Sem Cimento / Revestimento de Ti e HA



 AMPLITUDE[®]

- Acetábulo cilíndrico-esférico;
- Pólo plano;
- Press-fit equatorial:
1mm de diâmetro em todos os tamanhos;
- Duplo Revestimento:
spray de titânio (80µm) e HA (80µm).

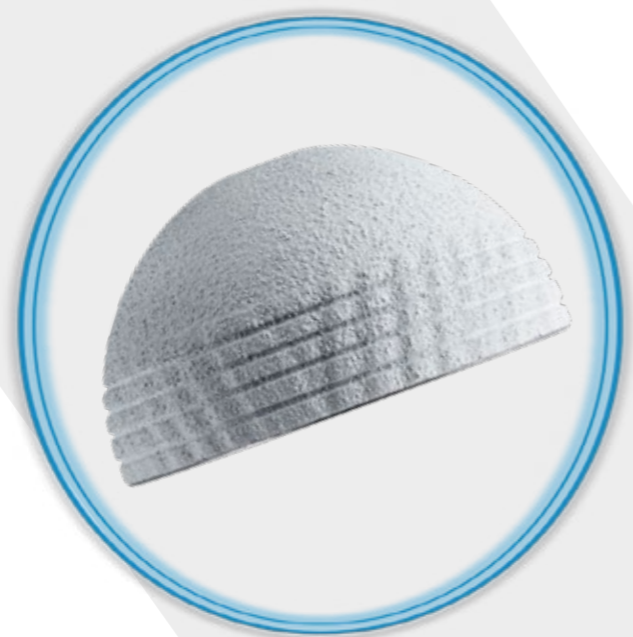

- Ranhuras concêntricas paralelas na área equatorial;
- Ranhuras invertidas na mesma área.



- Superfície interna em aço inoxidável altamente polido;
- Cantos arredondados;
- Material: aço inoxidável M30NW.

- Instrumental disponível em versão reta ou curva;
- Apenas uma bandeja de instrumentação.

- Inseto retentivo para cabeças femorais de Ø22.2 mm e Ø28 mm;
- Chanfro grande na borda de retenção: retardando o contato entre a calota e o colo da haste femoral, propiciando maior amplitude de movimento entre a haste femoral e o inseto;
- Material: UHMWPE



Referências

Acetábulo de Dupla Mobilidade: Sem Cimento / Revestimento de Ti e HA

Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 42mm	1-0111342
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 44mm	1-0111344
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 46mm	1-0111346
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 48mm	1-0111348
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 50mm	1-0111350
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 52mm	1-0111352
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 54mm	1-0111354
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 56mm	1-0111356
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 58mm	1-0111358
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 60mm	1-0111360
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 62mm	1-0111362
Acetábulo de Dupla Mobilidade SATURNE® II - Tam. 64mm	1-0111364

Insero de Dupla Mobilidade

	Cabeça Femoral Ø22,2mm	Cabeça Femoral Ø28mm
Insero SATURNE® II - Tam. 42mm	1-0103642	-
Insero SATURNE® II - Tam. 44mm	1-0103644	-
Insero SATURNE® II - Tam. 46mm	1-0103646	-
Insero SATURNE® II - Tam. 48mm	1-0103648	1-0103748
Insero SATURNE® II - Tam. 50mm	1-0103650	1-0103750
Insero SATURNE® II - Tam. 52mm	1-0103652	1-0103752
Insero SATURNE® II - Tam. 54mm	1-0103654	1-0103754
Insero SATURNE® II - Tam. 56mm	1-0103656	1-0103756
Insero SATURNE® II - Tam. 58mm	1-0103658	1-0103758
Insero SATURNE® II - Tam. 60mm	1-0103660	1-0103760
Insero SATURNE® II - Tam. 62mm	1-0103662	1-0103762
Insero SATURNE® II - Tam. 64mm	1-0103664	1-0103764